

amplifon

Z nami usłyszysz świat



ABC

PIEŁĘGNACJI

ŚWIATOWY LIDER W DZIEDZINIE PROTETYKI SŁUCHU


Grupa Amplifon istnieje od ponad 75 lat i jest światowym liderem w branży badań słuchu i aparatów słuchowych - posiada ponad 11% udziałów na światowym rynku*.

W Polsce istniejemy ponad 10 lat, intensywnie się rozwijamy i posiadamy już 100 oddziałów.

* corporate.amplifon.com/en

AMPLIFON NA ŚWIECIE

- ☑ 9 tys. oddziałów
- ☑ ponad 18 tys. zatrudnionych pracowników, w tym 9,5 tys. protetyków słuchu
- ☑ główna centrala znajduje się we Włoszech

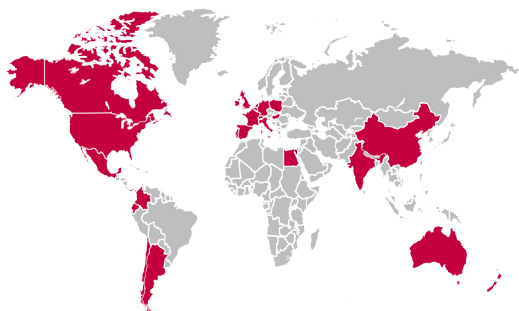

1. Mój aparat słuchowy
2. Środki pielęgnacyjne
 - 2.1 Spray do czyszczenia
 - 2.2 Chusteczki do czyszczenia
 - 2.3 Tabletki do mycia wkładki
 - 2.4 Pudełko do mycia wkładki
 - 2.5 Balonik do osuszania
 - 2.6 Kapsuły osuszające w pojemniku z sitkiem
 - 2.7 Elektryczne pudełko PerfectDry Lux do osuszania
 - 2.8 Zestawy startowe do pielęgnacji aparatów wewnętrznych i zewnętrznych
3. Użytkowanie baterii
4. Ogólne zasady wymiany filtrów do aparatów słuchowych
5. Ogólne zasady użytkowania aparatów słuchowych

Mój aparat słuchowy to:

Aparat posiada:

KOPUŁKĘ

typ:

WKŁADKĘ INDYWIDUALNĄ DO SŁUCHAWEK RIC

WKŁADKĘ INDYWIDUALNĄ DO APARATU ZAUSZNEGO

CIENKI WĘŻYK

OTWARTE DOPASOWANIE

Bateria do aparatu:

10

13

312

675

Aparat ładowalny, ładowarka

Filtr do aparatu:

Rekomendowane dla mnie środki pielęgnacyjne:

Spray

Chusteczki

Tabletki czyszczące oraz pojemnik do mycia

Balonik

Kapsułki osuszające oraz pojemnik do osuszania

Perfect DryLux

Zestawy pielęgnacyjne

Baterie

Filtry

ŚRODKI PIELĘGNACYJNE

SPRAY DO CZYSZCZENIA

Preparat antyseptyczny i odtłuszczający w formie sprayu pozwala chronić aparaty słuchowe przed zanieczyszczeniami, na które są narażone przez ciągły kontakt ze skórą, na której znajdują się gruczoły łojowe i potowe. Spray czyszczący zalecany jest do codziennej pielęgnacji każdego typu aparatów słuchowych (wewnątrzusznych, ze słuchawką zewnętrzną typu RIC oraz aparatów zausznych).

Instrukcja obsługi:

Spray należy rozpylić na czystą chusteczkę higieniczną i dokładnie przetrzeć nią aparat. W przypadku aparatów typu RIC i zausznych przecieramy najpierw część właściwą aparatu słuchowego, następnie wążek i wkładkę/kopułkę umieszczaną w uchu. Zdezynfekowany i oczyszczony aparat słuchowy umieszczamy w pudełku z kapsułką osuszającą bądź w urządzeniu PerfectDry Lux.



Nie należy rozpylać sprayu bezpośrednio na część elektroniczną aparatu słuchowego. Chronić przed dziećmi.

CHUSTECZKI DO CZYSZCZENIA

Jednorazowe chusteczki nasączone preparatem antyseptycznym i odtłuszczającym są zamiennikiem klasycznego sprayu do czyszczenia. Dzięki wygodnej formie pakowanych pojedynczo, gotowych do użycia chusteczek sprawdzą się w np. w podróży. Wystarczy wyjąć chusteczkę z opakowania, rozłożyć i oczyścić aparaty słuchowe - zaczynając od części elektronicznej, a kończąc na wkładce/kopułce.



Chusteczka jest jednorazowa, nie należy używać jej ponownie.

TABLETKI DO MYCIA WKŁADKI

Zarówno wkładka indywidualna, jak i kopułka, to elementy znajdujące się wewnątrz przewodu słuchowego, przez co narażone są na zanieczyszczenie woskowinę, której obecność uniemożliwia bądź osłabia słyszenie. Zalecane jest stosowanie tabletek jeśli zauważysz na wkładce lub kopułce zabrudzenie.

Instrukcja obsługi:

W dedykowanym do mycia pudełeczku umieść tabletkę do czyszczenia i zalej ciepłą wodą. W koszyczku połóż wkładkę/kopułkę (pamiętaj, aby nie wkładać części właściwej aparatu słuchowego!) i włóż do pudełka z rozpuszczoną tabletką do mycia. Woda powinna zakrywać umieszczoną w koszyczku wkładkę. Pozostaw w kąpieli na 30 minut. Po upływie tego czasu przepłucz wkładkę/kopułkę pod bieżącą wodą, wytrzyj chusteczką higieniczną, a następnie za pomocą balonika dokładnie przedmuchaaj wężyk i otwory wentylacyjne w kopułce bądź wkładce. Można myć dwie wkładki/kopułki jednocześnie.



Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Chronić przed dziećmi.

PUDEŁKO DO MYCIA WKŁADKI

W zestawie znajduje się zamykane pudełko do mycia oraz wsad w formie koszyczka, na którym umieszczamy wkładkę/kopułkę, aby zanurzyć ją w kąpieli. Po każdym użyciu pudełko należy opłukać pod bieżącą wodą oraz osuszyć.



BALONIK DO OSUSZANIA

Balonik do przedmuchiwania, inaczej nazywany gruszką, to wielofunkcyjne narzędzie do codziennej pielęgnacji aparatów słuchowych. Dzięki precyzyjnej końcówce jest głównie używany do wydmuchiwania wody z dźwiękowodu oraz wentylacji wkładki indywidualnej przy aparatach zausznych klasycznych. Doskonale służy również przy aparatach typu RIC czy wewnątrzusznych.

Instrukcja obsługi:

Wieczorem po uchyleniu komory baterii należy włożyć końcówkę balonika do komory i wydmuchać ewentualną wilgoć, również tę w kieszonce baterii. Zapobiega to dostawaniu się wilgoci w głąb aparatu i zmniejsza ryzyko awarii urządzenia. Dodatkowo balonik bardzo dobrze oczyszcza z wilgoci, kurzu i zanieczyszczeń mikrofony aparatu, zarówno boczne, oraz główny znajdujący się nad przyciskami zmiany głośności. Balonik pozwala osuszyć i oczyścić wnętrze kopułki, cienkiego dźwiękowodu, czy wentylację wkładki typu RIC. Użycie balonika jest bardzo szybkie i efektywne, dla zwiększenia skuteczności można następnie włożyć aparat do pojemnika z kapsułką osuszającą.



□ KAPSUŁY OSUSZAJĄCE W POJEMNIKU Z SITKIEM

Stosowanie kapsuł osuszających to niezbędny element codziennej pielęgnacji aparatów słuchowych. Zalegająca wilgoć może powodować uszkodzenie elektroniki, a następnie awarię aparatu, przy aparatach RIC również ich zintegrowanej słuchawki elektronicznej. Kapsuły osuszające stosowane są do aparatów zauszných, jak i wewnętrznych. Do osuszenia aparatów potrzebujemy pojemnika do osuszania oraz kapsuły. Pojemnik zawiera specjalne sitko, do którego wkładamy aparaty. Wymień kapsułę na nową, jeśli jej zawartość zmieni kolor z pomarańczowego na mleczno-żółty, jasny.

Instrukcja obsługi:

1. Wyjmij kapsułę osuszającą z foliowego opakowania.
2. Wyjmij sitko z pojemnika i umieść kapsułę na dnie papierową stroną do góry. Następnie włóż sitko z powrotem. Pamiętaj, by pojemnik był zawsze suchy i szczelnie zakręcony, by nie chłonął niepotrzebnie wilgoci z otoczenia.
3. Przetrzyj aparaty chusteczką, by usunąć powierzchniowe zabrudzenia, otwórz komorę baterii, a następnie umieść aparaty w sitku i szczelnie zakręć wieczko pojemnika. Zostaw tak aparaty do rana, po czym aparaty są gotowe do pracy.



Nie wyjmuj granulatu z kapsuł! Nie połykać. Trzymać z dala od dzieci. Tylko do użytku zewnętrznego.

□ ELEKTRYCZNE PUDEŁKO PERFECTDRY LUX DO OSUSZANIA APARATÓW SŁUCHOWYCH

Urządzenie wykorzystuje cyrkulację powietrza do bardzo skutecznego osuszenia aparatów słuchowych każdego typu oraz 3 typy promieni UV w celu dezynfekcji oraz sterylizacji aparatów, wkładek, kopulek, czy słuchawek zewnętrznych. Można osuszać również aparaty ładowalne.

Wilgoć to czynnik najbardziej zagrażający aparatom, gdyż może spowodować uszkodzenie bardzo czułej elektroniki w środku urządzenia. Zawilgoce nie mikrofonów zewnętrznych i/lub słuchawki elektronicznej znajdującej się w uchu to konieczność poniesienia kosztów naprawy. Wilgoć w komorze baterii przyspiesza zużycie baterii, może powodować korozję styków lub śniedzenie. Osuszaczem elektronicznym PerfectDry Lux osuszysz aparaty jak w profesjonalnym serwisie!



Instrukcja obsługi:

Osuszanie i dezynfekcja aparatów PerfectDry Lux

1. Podłącz urządzenie PerfectDry Lux do prądu za pomocą dołączonego do niego zasilacza. Zaświeci się niebieska lampka kontrolna sygnalizująca, że urządzenie jest gotowe do pracy. Jeśli żadne czynności nie zostaną podjęte przez 30 sekund, lampka kontrolna zgaśnie.
2. Oczyść aparat słuchowy za pomocą sprayu do czyszczenia lub ściereczek dedykowanych aparatom słuchowym. Następnie otwórz komorę baterii aparatu i uchył ją maksymalnie. Aparat można osuszać razem z baterią w środku, jednak zalecamy ją wyjąć, by dokładnie osuszyć również wnętrze komory. Zamknij pokrywę urządzenia.
3. Wciśnij jeden raz przycisk dotykowy, aby uruchomić wykonywanie cyklu. Podczas funkcjonowania urządzenia niebieska lampka kontrolna miga powoli pulsującym światłem. Cykl pracy osuszania może być wykonywany wyłącznie, gdy pokrywa jest zamknięta. Otwarcie pokrywy w trakcie suszenia przerywa automatycznie pracę urządzenia. Cykl osuszania trwa 30 minut, następnie urządzenie PerfectDry Lux wyłączy się automatycznie. Lampka kontrolna zgaśnie.
4. Aparat można wyjąć i od razu go używać, lub pozostawić do momentu użycia.

☐ ZESTAW STARTOWY DO PIELĘGNACJI APARATÓW WEWNĄTRZUSZNYCH

Zestaw do kompleksowej pielęgnacji wewnętrznych aparatów słuchowych zawiera wszystkie niezbędne środki pielęgnacyjne dla każdego nowego użytkownika aparatów słuchowych. W zestawie znajdują się:

- 1 pojemnik do czyszczenia i osuszania aparatów słuchowych
- 1 spray czyszczący
- 15 chusteczek czyszczących
- 4 kapsuły osuszające



Aby aparat działał prawidłowo przez długi czas, należy codziennie czyścić obudowę aparatu za pomocą sprayu bądź chusteczki, a następnie umieszczać z szeroko otwartą komorą baterii w pudełeczku z kapsułą osuszającą lub w urządzeniu PerfectDry Lux.

☐ ZESTAW STARTOWY DO PIELĘGNACJI APARATÓW ZAUSZNYCH

Zestaw do kompleksowej pielęgnacji aparatów zausznych zawiera:

- 1 balonik do przedmuchiwania
- 1 pojemnik do czyszczenia i osuszania aparatów słuchowych
- 1 spray czyszczący
- 4 tabletki czyszczące
- 4 chusteczki czyszczące
- 4 kapsuły osuszające



Każdy aparat zauszny powinien być oczyszczony za pomocą płynu antyseptycznego (w formie sprayu lub nasączonych chusteczek). Aparaty słuchowe następnie umieszczamy w pudełeczku z kapsułą osuszającą lub w urządzeniu PerfectDry Lux. Raz na dwa tygodnie bądź częściej, jeśli jest taka potrzeba, umieszczamy wkładkę/kopułkę w kąpielni wodnej z tabletką czyszczącą, pozostawimy na 30 minut, opłukujemy pod bieżącą wodą i przedmujemy balonikiem.

☐ BATERIE

Ogólne zasady użytkowania baterii do aparatów słuchowych

1. Należy używać baterii dedykowanych aparatom słuchowym, o odpowiednim napięciu i rozmiarze.
2. Baterie do aparatów słuchowych są cynkowo-powietrzne, co oznacza, że zaczynają się zużywać od momentu odklejenia naklejki zabezpieczającej. Warto chodzić w aparatach codziennie, od rana do wieczora, by w pełni wykorzystać jej możliwości. Nie oszczędzimy baterii chodząc mniej w aparatach, ponieważ one i tak się rozładują, nawet nie używane, będąc już odfoliowane.
3. Baterie mogą zużywać się szybciej w okresie letnim oraz zimowym. W czasie letnich upałów pocimy się intensywniej, co powoduje większe wnikanie wilgoci do aparatów oraz komór baterii, a zimą to samo zjawisko powoduje choćby duża różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, oraz ogólna wyższa wilgotność powietrza. W tym czasie szczególnie należy zwrócić uwagę na dokładne osuszanie aparatów - zalecamy kapsułki osuszające oraz PerfectDry Lux.
4. Czas działania baterii jest uzależniony od wielkości ubytku słuchu (im większy, tym bateria zużywa się szybciej), czy zwiększamy głośność lub korzystamy ze zmiany programów. Również wilgoć w komorze baterii rozładuje je szybciej.
5. Po odklejeniu naklejki zabezpieczającej wkładamy baterię błyszczącą jednolitą stroną "do góry". Włożenie baterii odwrotnie spowoduje, że nie zamkniemy komory baterii.



Zużyte baterie należy wrzucić do specjalnego pojemnika na baterie lub oddać w swoim oddziale Amplifon. Baterie te podlegają utylizacji, nie wolno wyrzucać ich do śmieci. Chronić przed dziećmi.

□ OGÓLNE ZASADY WYMIANY FILTRÓW DO APARATÓW SŁUCHOWYCH



1. Filtry zabezpieczające przed dostawaniem się woskowiny mogą znajdować się np. w aparacie słuchowym (wewnątrzuszynym), w słuchawce typu RIC oraz wkładce typu RIC, a także w niektórych typach cienkich dźwiękowodów.
2. Filtr należy zmieniać regularnie, jak tylko poczujemy, że słyszymy ciszej, lub widzimy nadmiar woskowiny w koszyczku filtra. W zależności od ilości woskowiny oraz potliwości, należy je wymieniać średnio co dwa tygodnie, ale jest to kwestia bardzo indywidualna. Porozmawiaj o tym z Twoim protetykiem. Latem warto zmieniać filtry częściej, przez zwiększoną potliwość.
3. Filtr bez problemu można zmienić samemu. Twój protetyk słuchu nauczy Cię, jak wymieniać dedykowany Twoim aparatom filtr. Zaopatrz się w zestaw filtrów, by w każdej chwili móc zadbać o swoje aparaty i przywrócić komfort wyraźnego słyszenia.

□ OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA APARATÓW SŁUCHOWYCH

1. Pamiętaj o trzech najważniejszych zasadach: w aparatach należy chodzić od rana do wieczora, nie kąpać się w aparatach. Należy również uchylać na noc komorę baterii – dzięki temu przedłużymy jej żywotność.
2. Jeśli posiadasz aparaty ładowalne, pamiętaj, aby codziennie wieczorem odkładać je do ładowarki – po zakończonym cyklu ładowania aparaty bez obaw mogą pozostać w ładowarce do rana. Jeśli chcesz wyjąć je wcześniej z ładowarki, ale nie zakładasz jeszcze aparatów – pamiętaj, aby wyłączyć je przyciskiem – w przeciwnym razie będą pracować.
3. Aparaty słuchowe należy nosić codziennie. Aparaty pomagają utrzymać ubytek słuchu lub zmniejszają jego pogłębianie. Ponadto stopniowo poprawia się rozumienie mowy, poprzez stałą stymulację mózgu, odpowiedzialnego za odbiór, przetwarzanie dźwięków i rozumienie danego języka.
4. Okres adaptacji do aparatów słuchowych jest zależny od głębokości uszkodzenia słuchu oraz stopnia rozumienia mowy przed założeniem aparatów. Trudności w słyszeniu mają trwały charakter i są spowodowane nieodwracalnymi uszkodzeniami w układzie słuchowym, wpływają negatywnie na jakość i komfort życia. Adaptacja wymaga czasu i cierpliwości, oraz regularnego noszenia aparatów. Mózg ponownie przyzwyczai się do słyszenia dźwięków, których dawno nie słyszał i staną się dla nas bardziej naturalne, a mowa wyrazista. Na początku tego procesu pozostaniecie Państwo w kontakcie z protetykiem słuchu. W razie jakichkolwiek trudności informujcie na bieżąco o swoich obserwacjach i odczuciach. Wasz protetyk będzie mógł zareagować i dopasować ustawienia aparatów.

5. Pamiętajmy o codziennej pielęgnacji aparatów. Do czynności pielęgnacyjnych należy przecieranie chusteczką higieniczną z dodatkiem sprayu do dezynfekcji. W przypadku wkładek indywidualnych ich regularne mycie w ciepłej wodzie z dodatkiem tabletek czyszczących. Osuszenie aparatów można wykonać: za pomocą balonika, specjalnych tabletek absorbujących wilgoć albo urządzenia PerfectDry Lux, przedmuchiwanie wlotów mikrofonów. Pamiętajmy o regularnej wymianie co ok. 3 miesiące dźwiękowodów przy wkładkach indywidualnych klasycznych. Kontrola kopułek polega na sprawdzeniu, czy nie są przerwane, zabrudzone, uszkodzone. Należy pamiętać o regularnej wymianie kopułek w oddziale lub samemu w domu.
6. Bardzo istotne są regularne serwisy aparatów w Waszym gabinecie, co 3-4 miesiące, w celu sprawdzenia aparatów, czy nie są zabrudzone, zawilgocone, uszkodzone oraz sprawdzenie dodatkowych elementów jak wkładki, wężyki, kopułki. Raz w roku należy wykonać kontrolne badanie słuchu, by na bieżąco aktualizować ustawienia aparatów zgodnie z audiogramem.
7. W codziennej obsłudze aparatów słuchowych bardzo pomaga aplikacja, którą można bezpłatnie pobrać na telefon. Poproś o pomoc swojego protetyka słuchu. Dzięki aplikacji możesz znacznie zwiększyć możliwości swoich aparatów, np. zmieniać programy słyszenia (codzienny, ulica, telewizja, muzyka itd.), sprawdzić poziom naładowania baterii, zmieniać kierunkowość mikrofonów, by uzyskać maksymalne skupienie na tym, na czym potrzebujesz mieć pełną koncentrację, zmieniać barwę głosu. W części aparatów możesz również przesyłać rozmowy telefoniczne i przesyłać strumieniowo dane, np. muzykę.



W AMPLIFON OFERUJEMY:

- ☑ Szeroki wybór aparatów słuchowych marek **Oticon** oraz **Signia**, opartych na zaawansowanych technologiach, dostosowanych do każdego ubytku słuchu
- ☑ Bezpłatne i kompleksowe badania słuchu oraz konsultacje
- ☑ Możliwość niezobowiązującego testowania aparatów
- ☑ Opiekę wykwalifikowanych specjalistów oraz bezpłatny serwis
- ☑ Pomoc w refundacji NFZ, MOPS, PFRON oraz innych

AMPLIFON W POLSCE

- ☑ Ponad 100 gabinetów
- ☑ 200 wykwalifikowanych specjalistów
- ☑ Pracujemy wyłącznie na najlepszym sprzęcie nowej generacji



Lista gabinetów dostępna na stronie www.amplifon.com/pl/nasze-gabinety

**Pomagamy ponownie odkrywać
emocje i radość związane ze słyszeniem.
Jesteśmy specjalistami w swojej dziedzinie!**

W Amplifon poświęcamy wiele uwagi,
aby zrozumieć, w jakim stanie jest słuch naszych
klientów oraz jak wpływa to na ich życie.
Nasze rozwiązania są zaprojektowane tak, aby
czuli się Państwo komfortowo, nosząc i używając
aparaty słuchowe każdego dnia.

Więcej informacji:
800-888-899

[Amplifon.com.pl](https://www.amplifon.com.pl)